

BPAP Auto S9 Series



Partes del equipo




- 1. Salida de aire.
- 2. Perilla/botón de selección.
- 3. Menú informativo.
- 4. Pantalla.
- 5. Botón de ON/OFF.
- 6. Menú de instalación.



- 7. Entrada de poder.
- 8. Puerto para módulos.
- 9. Filtro de aire.
- 10. Ranura Tarjeta SD.

Partes del humidificador

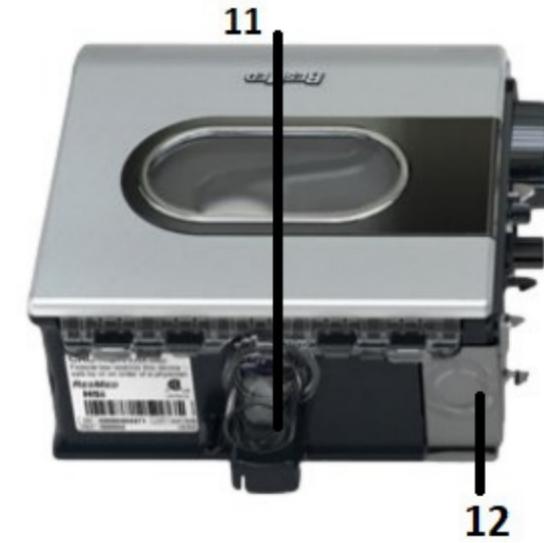

- 11. Salida de aire.
- 12. Botón de liberación.
- 13. Tapa a presión.
- 14. Junta de la tapa.
- 15. Conexión con el equipo.
- 16. Traba.
- 17. Cámara de agua.



Fijo: (607) 6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

Instrucciones de uso

Información adicional

Recomendaciones



1. Alinee el equipo con el humidificador y empújelos hasta que encajen. **2.** Para llenar la cámara de agua, deslice la traba y levante la tapa a presión. Retírela tirando hacia arriba. Luego llene la cámara con agua, **preferiblemente de botella**, hasta la marca de nivel máximo (aprox. 380 ml). Vuelva a colocar la cámara en su lugar y cierre la tapa a presión. **3.** Conecte el cable de alimentación a la entrada de poder del equipo. Luego conecte el cable de alimentación al adaptador y el otro extremo conéctelo al tomacorriente. **4.** Conecte firmemente un extremo de la manguera corrugada en la salida de aire del humidificador y el otro extremo irá a la máscara.

5. Para iniciar el tratamiento respire con la máscara puesta u oprima el botón de ON/OFF. Para detener el tratamiento quítese la máscara u oprima el botón de ON/OFF.

Si usa oxígeno con el equipo, conéctelo a la máscara directamente. Además, corte el flujo de oxígeno si no está usando el equipo. El nivel de humidificación se puede cambiar desde la pantalla inicial, girando la perilla hasta llegar al ícono de la gota y oprimiéndolo. Gire la perilla para ajustar el nivel deseado y vuelva a oprimirla para seleccionarlo. El equipo ya se encuentra configurado de acuerdo a las indicaciones de su médico. Evite cambiar la configuración.

Si desea la lectura de sus resultados por favor comuníquese con nosotros y le diremos como obtenerlos.

Realice la limpieza externa del equipo con un paño y detergente suave o jabón de tocador. Para limpiar la cámara de agua puede usar vinagre.

Es de suma importancia vaciar la cámara de agua si va a transportar el equipo.

Cuando apague el equipo, espere 15 minutos para que la placa de calefacción y el agua se enfríen.

El área donde se ubique el equipo debe estar elevada, estable y totalmente despejada.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos anualmente. Si desea cambio de máscara o manguera, debe hacerlo con autorización de su EPS.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

No dude en comunicarse con nosotros si tiene inconvenientes