


# BPAP G2S B25A




## Parte superior del equipo

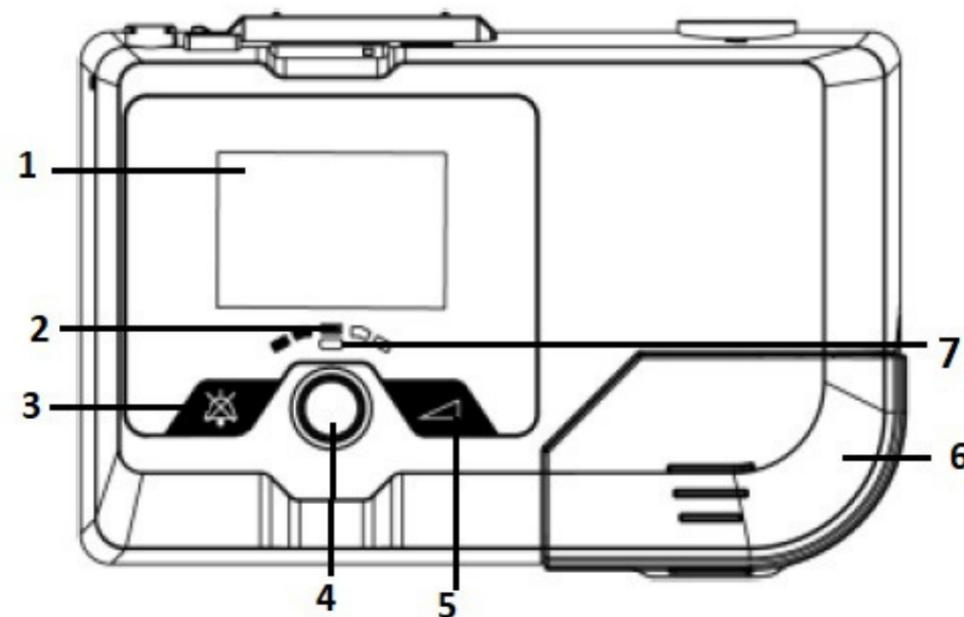

1. Pantalla. 2. Indicador del humidificador. 3. Botón para silenciar. 4. Perilla/botón de mando. 5. Botón de rampa. 6. Cámara de agua. 7. Indicador de encendido.

## Parte trasera del equipo

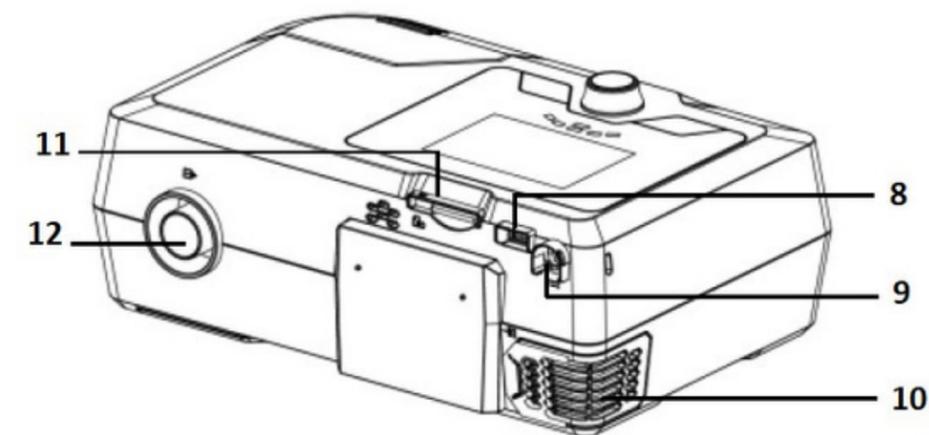

8. Puerto de comunicaciones. 9. Entrada alimentación DC. 10. Filtro de entrada de aire. 11. Ranura para tarjeta SD. 12. Salida de aire.



Fijo: (607) 6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

# Instrucciones de uso

# Información adicional

# Recomendaciones



**1.** Para llenar la cámara de agua, retírela del dispositivo halando hacia adelante. Ábrala y llene con agua, **preferiblemente de botella**, hasta la línea de capacidad máxima (MAX). Luego vuelva a ubicarla dentro del dispositivo y verifique que haya quedado bien ajustada. **2.** Conecte un extremo de la manguera corrugada a la mascarilla que se le ha proporcionado. El otro extremo de la manguera irá a la salida de aire del equipo. Verifique que ambas conexiones hayan quedado bien ajustadas. **3.** Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de manera directa. **No utilice extensiones.** Luego conecte el otro extremo al adaptador y finalmente conecte el cable al equipo por la Entrada de alimentación DC. Una vez que todo esté conectado, el equipo se enciende automáticamente. **4.** Para iniciar el tratamiento, presione una vez la perilla/botón de mando. Cuando acabe de usar el dispositivo, presione y sostenga la perilla dos segundos. Luego desconéctelo de la corriente.

Si usa oxígeno con el equipo, conéctelo a la máscara directamente. Además, corte el flujo de oxígeno si no está usando el equipo.

El nivel de humidificación se puede cambiar desde la pantalla inicial, girando la perilla hasta llegar al ícono de la gota y oprimiéndolo. Gire la perilla para ajustar el nivel deseado y vuelva a oprimirla para seleccionarlo.

El equipo ya se encuentra configurado de acuerdo a las indicaciones de su médico. Evite cambiar la configuración.

Si desea la lectura de sus resultados por favor comuníquese con nosotros y le diremos como obtenerlos.

Realice la limpieza externa del equipo con un paño y detergente suave o jabón de tocador. Para limpiar la cámara de agua puede usar vinagre.

Es de suma importancia vaciar la cámara de agua si va a transportar el equipo.

Cuando apague el equipo, espere 15 minutos para que la placa de calefacción y el agua se enfríen.

El área donde se ubique el equipo debe estar elevada y totalmente despejada.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos anualmente. Si desea cambio de máscara o manguera, debe hacerlo con autorización de su EPS.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

**No dude en comunicarse con nosotros si tiene inconvenientes**