

# CPAP iCH Auto


# APEX



## Parte frontal del equipo



- 1. Pantalla LCD.
- 2. Botón aumentar/reducir.
- 3. Botón ON/OFF.
- 4. Botón de menú.

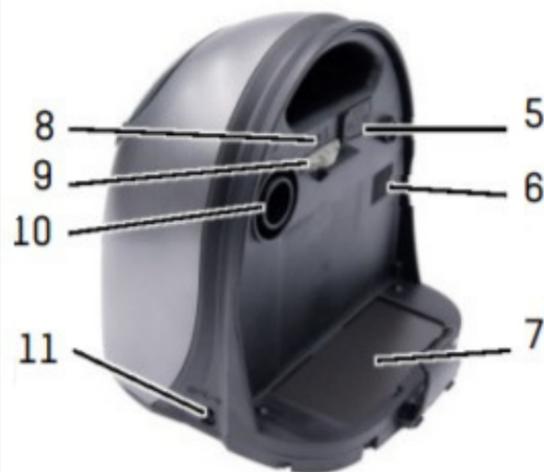

- 5. Ranura SD/conector USB.
- 6. Filtro de aire.
- 7. Plataforma del calentador.
- 8. Indicador del humidificador.
- 9. Control del humidificador.
- 10. Salida de aire.
- 11. Enchufe.

## Parte trasera del equipo



- 12. Salida de aire de la cámara de agua.
- 13. Espiga y mortaja.
- 14. Línea de relleno.
- 15. Cámara de agua.
- 16. Pestillo.

**ForpreSalud IPS**  
CONFIANZA Y BIENESTAR

Fijo: (607) 6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

## Instrucciones de uso

1. Para quitar la cámara de agua, retire el pestillo halándolo hacia afuera y luego, también, tire de la cámara de agua hacia afuera, poniendo el dedo pulgar sobre la parte superior de esta.

2. Para abrir la cámara, tire de la pestaña. Llénela con agua a temperatura ambiente preferiblemente de botella, hasta la marca de MAX (aproximadamente 300 ml). Para volver a ubicar la cámara de agua, asegúrese de que el conector de silicona encaje con la salida de aire, inclinándola hacia ella. Luego empuje la cámara hasta que se asegure con la plataforma del calentador y presione el pestillo para asegurar.

3. Ahora, conecte un extremo de la manguera corrugada a la máscara que le ha sido proporcionada. El otro extremo de la manguera irá a la salida de aire del

humidificador. Verifique que haya quedado bien ajustada en ambos extremos.

## Instrucciones de uso

4. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de manera directa, sin usar extensiones. Luego conecte el otro extremo al adaptador y finalmente conecte el cable al equipo por la entrada de alimentación. **El equipo se encenderá automáticamente.**

5. Colóquese la máscara y oprima el botón ON/OFF para iniciar tratamiento. Puede observar que el botón se ilumina de color verde.

6. Para apagar el equipo simplemente debe desenchufar el equipo, tanto del tomacorriente como de la toma del equipo.

**Nota:** si usa oxígeno con el equipo, conéctelo a la máscara. Además, corte el flujo de oxígeno si no lo está usando. Para la limpieza del equipo use detergente suave y paños. Para lavar la cámara de agua puede usar vinagre.

## Recomendaciones

Es de suma importancia vaciar la cámara de agua si va a transportar el equipo.

El equipo ya se encuentra configurado de acuerdo a las indicaciones de su médico. Evite cambiar la configuración.

Cuando apague el equipo, espere 15 minutos para que la placa de calefacción y el agua se enfríen.

El área donde se ubique el equipo debe estar elevada y totalmente despejada.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos anualmente. Si desea cambio de máscara o manguera, debe hacerlo con autorización de su EPS.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

**No dude en comunicarse con nosotros si tiene dudas**