


CPAP E-20A-H-O




Parte superior del equipo

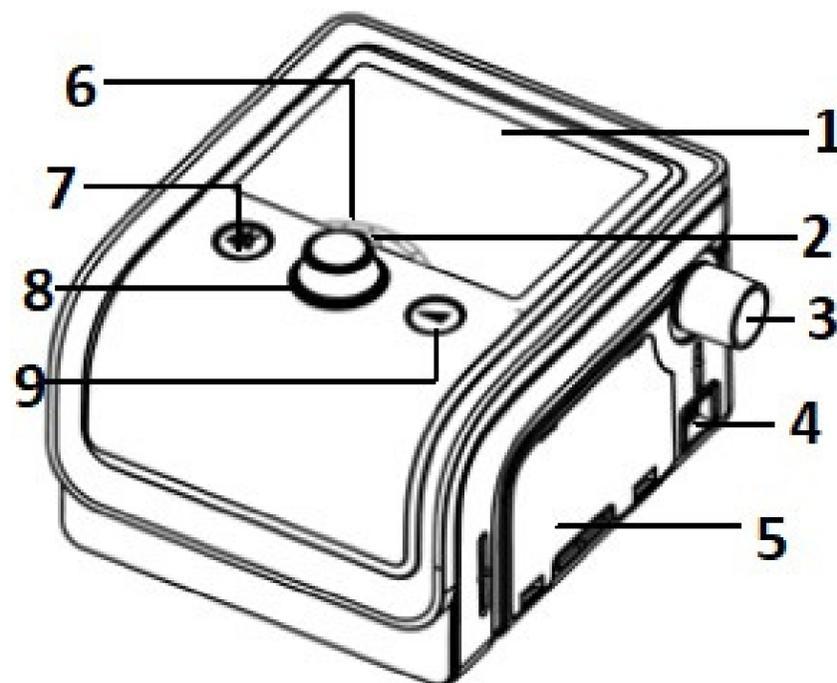

- 1. Pantalla.
- 2. Indicador de potencia.
- 3. Salida de aire.
- 4. Conector del humidificador.
- 5. Armazón.
- 6. Indicador del humidificador.
- 7. Botón de silenciar.
- 8. Perilla/botón de mando.
- 9. Botón de rampa.

Parte trasera del equipo

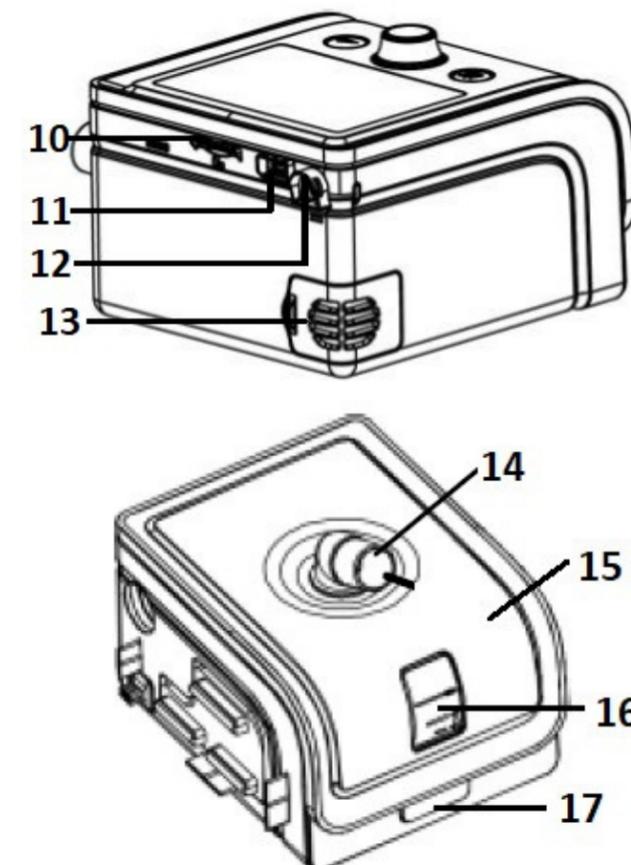

- 10. Ranura de tarjeta SD.
- 11. Puerto de comunicaciones.
- 12. Entrada de energía DC.
- 13. Filtro de entrada de aire.
- 14. Salida de aire del humidificador.
- 15. Humidificador.
- 16. Cámara de agua.
- 17. Botón para acceder a la cámara de agua.



Fijo: (607) 6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

Instrucciones de uso

Información adicional

Recomendaciones

Es de suma importancia vaciar la cámara de

agua si va a transportar el equipo.

El equipo ya se encuentra configurado de acuerdo a las indicaciones de su médico. Evite cambiar la configuración.

Cuando apague el equipo, espere 15 minutos para que la placa de calefacción y el agua se enfríen.

El área donde se ubique el equipo debe estar elevada y totalmente despejada.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos anualmente. Si desea cambio de máscara o manguera, debe hacerlo con autorización de su EPS.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

No dude en comunicarse con nosotros si tiene dudas



Si usa oxígeno con el equipo, conéctelo a la máscara directamente. Además, corte el flujo de oxígeno si no está usando el

equipo. El nivel de humidificación se puede cambiar desde la pantalla inicial, girando la perilla hasta llegar al icono de la gota y oprimiéndolo. Gire la perilla para ajustar el nivel deseado y vuelva a oprimirla para seleccionarlo.

El equipo ya se encuentra configurado de acuerdo a las indicaciones de su médico. Evite cambiar la configuración.

Si desea la lectura de sus resultados por favor comuníquese con nosotros y le diremos como obtenerlos.

Realice la limpieza externa del equipo con un paño y detergente suave o jabón de tocador. Para limpiar la cámara de agua puede usar vinagre.

1. Para acceder a la cámara de agua, oprima el botón de acceso a la cámara de

agua y levante la tapa del humidificador.

Tire hacia adelante la estructura plástica y tire hacia abajo los pestillos para abrirla,

luego llénela hasta la línea de MAX con

agua, **preferiblemente de botella**. Vuelva a asegurar la cámara de agua, introdúzcala y cierre el humidificador. **2.** Conecte el

cable de alimentación, el adaptador de fuente de alimentación y la manguera corrugada tanto a la máscara como a la salida de aire del humidificador.

Verifique que la manguera quede bien ajustada en ambas conexiones.

3. Pulse la perilla/botón de mando para iniciar el tratamiento.

4. Cuando termine de usar el equipo, retire la máscara, mantenga presionado el botón de mando por **dos segundos** y el equipo dejará de suministrar aire. Desconecte el cable de alimentación