

Concentrador de oxígeno bajo flujo AirSep VisionAire

AIRSEP®



Parte delantera del equipo



1. Etiqueta de advertencia y alarmas.
2. Medidor de flujo y perilla de ajuste.
3. Salida de oxígeno.
4. Asas de transporte.
5. Horómetro para registro de horas.
6. Botón de reinicio. Es el fusible que protege de picos de energía.
7. Interruptor de encendido/apagado.

Parte trasera del equipo



8. Vaso humidificador.
9. Espacio para colocar el vaso humidificador con correa ajustable.
10. Cable de poder.
11. Llantas.

ForpreSalud IPS
CONFIANZA Y BIENESTAR

Teléfono Fijo: 607-6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

Instrucciones de uso

1. Ubique el equipo en un área plana, con ambiente limpio, ventilada y lejos del sol. No olvide retirar el vinipel antes de utilizar el equipo. **No cubrir el equipo.**

2. Para hacer uso del vaso humidificador gire la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj para destaparlo. Vierta agua de botella, botellón o filtro hasta la marca del vaso y gire la tapa para cerrarlo. **No use agua de la llave o hervida.** Colóquelo en la parte superior del equipo y ajústelo con la correa de velcro.

3. Coloque el vaso humidificador en el espacio destinado para esto y ajústelo. Luego, conecte el tubo del vaso a la salida de oxígeno y al conector situado en la tapa del vaso humidificador.

4. Conecte el equipo a la red eléctrica de 110 V y 3 A, mediante el cable de poder. **No haga uso de extensiones o adaptadores.**




Instrucciones de uso

5. Encienda el equipo haciendo uso del interruptor, poniéndolo en la posición "I". El indicador de oxígeno permanecerá encendido por unos minutos.

6. Para comenzar el suministro de oxígeno, gire suavemente la perilla del flujómetro hasta la cantidad de litros por minuto (L/min) indicada por el médico. Para aumentar el flujo gire la perilla hacia la derecha y para disminuirlo hacia la izquierda.

7. Al usar la cánula de oxígeno, conéctela a la salida del humidificador. Luego, déjela reposar sobre las orejas del paciente e inserte el tubo nasal en las fosas nasales.

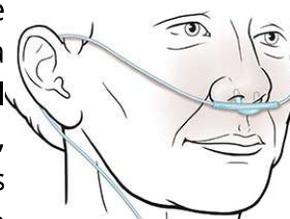

8. Cuando termine la terapia con oxígeno, coloque el interruptor en la posición "O" y desconéctelo de la corriente.

Recomendaciones

No ubique el equipo cerca a superficies o elementos que puedan ser afectados por el calor. Cambiar diariamente el agua del humidificador.

Ante cualquier alarma, tanto visual como audible, primero verifique que las mangueras no estén obstruidas. Si el problema persiste, comuníquese con nosotros.

El área donde se ubique el equipo debe estar totalmente despejada, en al menos 1 m², para evitar sobrecalentarlo.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos cada 3 meses.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

Para más información visite:
forpresalud.com.co/oxigeno