


Concentrador de oxígeno bajo flujo EverFlo

PHILIPS



Parte delantera del equipo

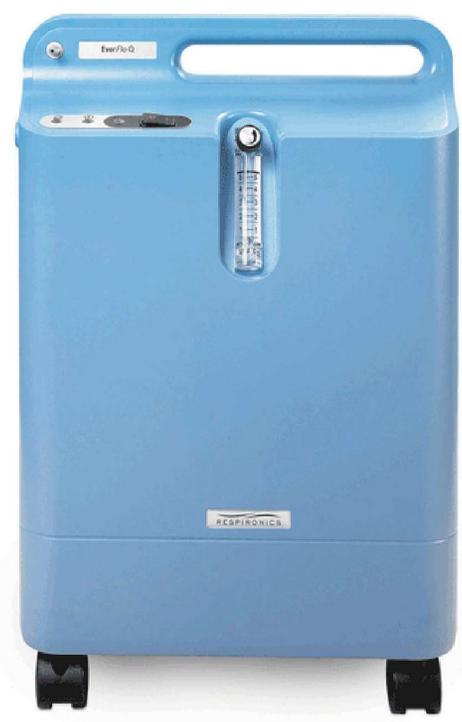

- 1. Medidor de flujo.
- 2. Interruptor de encendido/apagado.
- 3. LEDs indicadores. De derecha a izquierda: verde, amarillo y rojo.
- 4. Salida de oxígeno.
- 5. Etiqueta de serial. Bajo la etiqueta se encuentra el puerto UltraFill.
- 6. Tubo conector de humidificador.

Parte trasera del equipo



- 7. Espacio para el humidificador junto a su correa de soporte.
- 8. Gabinete filtro de entrada de aire. Aquí se guarda el tubo conector de humidificador.
- 9. Llantas.
- 10. Cable de poder.

ForpreSalud IPS
CONFIANZA Y BIENESTAR

Telefono Fijo: 607-6986037

Mantenimiento: 316 2810627
Asistencia 24 h.: 322 2805312

Instrucciones de uso

1. Ubique el equipo en un área plana, con ambiente limpio, ventilada y lejos del sol. No olvide retirar el vinipel antes de utilizar el equipo. **No cubrir el equipo.**

2. Conecte el equipo a la red eléctrica de 110 V y 3,4 A, mediante el cable de poder. **No haga uso de extensiones o adaptadores.**



3. Para hacer uso del vaso humidificador gire la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj para destaparlo. Vierta agua de botella, botellón o filtro hasta la marca del vaso y gire la tapa para cerrarlo. **No use agua de la llave o hervida.** Colóquelo en la parte superior del equipo y ajústelo con la correa de velcro.


4. Abra la puerta trasera del filtro y retire el tubo conector del humidificador. Conecte uno de los extremos del tubo al conector de salida de oxígeno y el otro extremo a la parte superior del humidificador. Asimismo, conecte la cánula a la botella del humidificador.

Instrucciones de uso

5. Tras encender el equipo con el interruptor, se iluminan los tres LED y se oye una alarma y luego solo el LED verde queda encendido. Puede usar el equipo inmediatamente.

6. Para comenzar el suministro de oxígeno, gire suavemente la perilla del flujómetro hasta la cantidad de litros por minuto (L/min) indicada por el médico. Para aumentar el flujo gire la perilla hacia la derecha y para disminuirlo hacia la izquierda.

7. Al usar la cánula de oxígeno, conéctela a la salida del humidificador. Luego, déjela reposar sobre las orejas del paciente e inserte el tubo nasal en las fosas nasales.

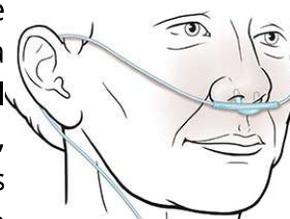

8. Cuando termine la terapia con oxígeno, coloque el interruptor en la posición "O" y desconéctelo de la corriente.

Recomendaciones

Limpiar el filtro de entrada de aire, ubicado en la parte trasera, 1 vez por semana con agua y jabón. Cambiar diariamente el agua del humidificador.

Si se enciende el LED amarillo significa que hay obstrucción en las manguera o hay baja concentración de oxígeno. Si se enciende el LED rojo, comuníquese con nosotros pues algo falla en el sistema.

El área donde se ubique el equipo debe estar totalmente despejada, en al menos 1 m², para evitar sobrecalentarlo.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos cada 3 meses.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

Para más información visite:
forpresalud.com.co/oxigeno