

## Concentrador de oxígeno bajo flujo JAY-5AW




## Parte delantera del equipo



1. Perilla reguladora de flujo.
2. Flujómetro.
3. Pantalla LCD.
4. Interruptor encendido/apagado.
5. Panel LED de alarmas.
6. Salida de oxígeno.
7. Vaso humidificador.

## Partes trasera y lateral del equipo

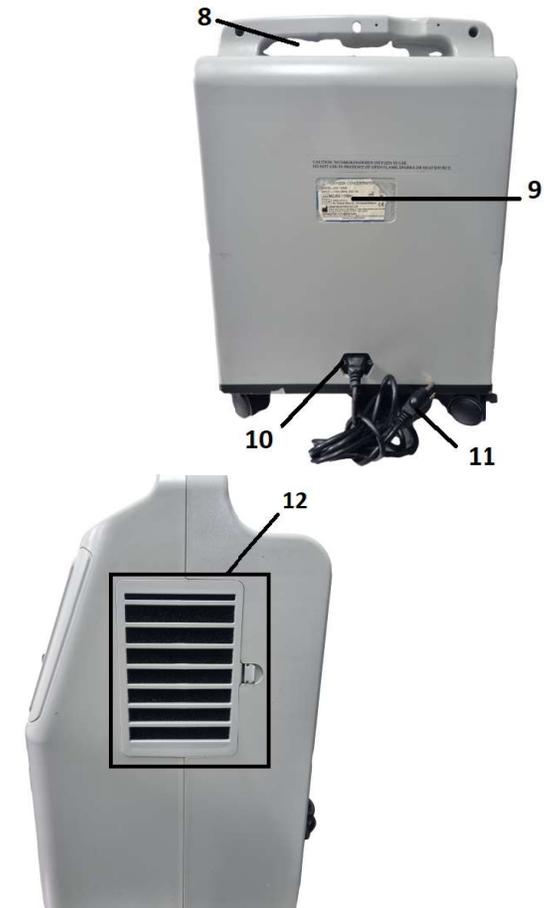

8. Asa de transporte.
9. Especificaciones técnicas del equipo.
10. Conector del cable de poder.
11. Cable de poder.
12. Gabinete filtro de aire.

**ForpreSalud IPS**  
CONFIANZA Y BIENESTAR

Telefono Fijo: 607-6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

## Instrucciones de uso

1. Ubique el equipo en un área plana, con ambiente limpio, ventilada y lejos del sol. No olvide retirar el vinipel antes de utilizar el equipo. **No cubrir el equipo.**

2. Para hacer uso del vaso humidificador gire la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj para destaparlo. Vierta agua de botella, botellón o filtro hasta la marca del vaso y gire la tapa para cerrarlo. **No use agua de la llave o hervida caliente.** Colóquelo en la parte superior del equipo y asegúrelo con la liga.

3. Conecte el tubo que viene incorporado al humidificador a la salida de oxígeno del concentrador.

4. Identifique en la parte trasera la entrada del cable de poder y conéctelo. El otro extremo del cable irá a un toma corriente de 110 V y 2,7 A, de manera directa. **No haga uso de extensiones o adaptadores.**




## Instrucciones de uso

5. Tras encender el equipo con el interruptor, verá como se enciende la pantalla. El LED señalado con las siglas "P.O." permanecerá encendido y de color verde.

6. Para comenzar el suministro de oxígeno, gire suavemente la perilla del flujómetro hasta la cantidad de litros por minuto (L/min) indicada por el médico. Para aumentar el flujo gire la perilla hacia la derecha y para disminuirlo hacia la izquierda.

7. Al usar la cánula de oxígeno, conéctela a la salida del humidificador. Luego, déjela reposar sobre las orejas del paciente e inserte el tubo nasal en las fosas nasales.

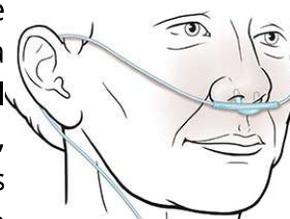

8. Cuando termine la terapia con oxígeno, coloque el interruptor en la posición "O" y desconéctelo de la corriente.

## Recomendaciones

Limpiar el filtro de entrada de aire, ubicado en la parte lateral, 1 vez por semana con agua y jabón. Cambiar diariamente el agua del humidificador.

Las alarmas visuales que tiene el equipo son:

P.F.: Fallo de encendido (luz roja).

L.P.: Presión baja (luz amarilla).

H.P.(T): Presión o alta temperatura (luz roja).

L.O2.: pureza de oxígeno < 85% (luz roja).

H.O2.: pureza de oxígeno > 85% (luz azul).

El área donde se ubique el equipo debe estar totalmente despejada, en al menos 1 m<sup>2</sup>, para evitar sobrecalentarlo.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos cada 3 meses.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

Para más información visite:  
[forpresalud.com.co/oxigeno](http://forpresalud.com.co/oxigeno)