


Concentrador de oxígeno bajo flujo Mark 5 Nuvo Lite

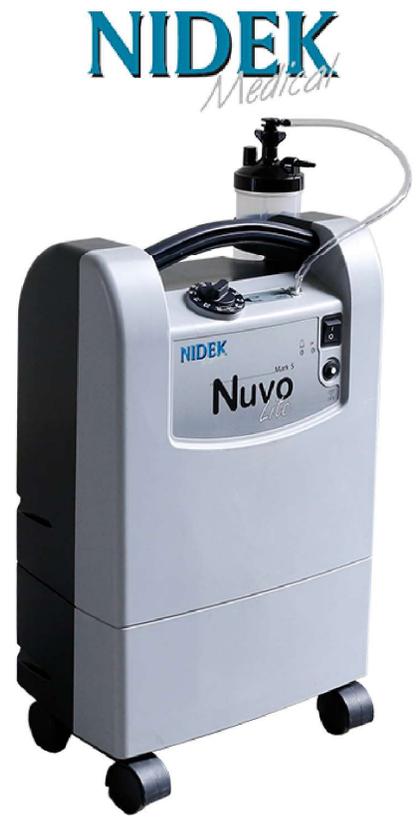

Telefono Fijo: 607-6986037

Mantenimiento: 316 2810627
Asistencia 24 h.: 322 2805312

Parte delantera del equipo



- 1. Regulador de flujo.
- 2. Salida de oxígeno.
- 3. Interruptor de encendido/apagado.
- 4. Botón de reinicio. Es el fusible que protege de picos de energía.
- 5. LEDs indicadores (verde y amarillo o rojo).

Parte trasera del equipo



- 6. Espacio reservado para humidificador con correa para ajuste.
- 7. Etiqueta de información técnica.
- 8. Cable de poder.
- 9. Filtro de aire con rejilla protectora.
- 10. Contador de horas de trabajo.

Instrucciones de uso

1. Ubique el equipo en un área plana, con ambiente limpio, ventilada y lejos del sol. No olvide retirar el vinipel antes de utilizar el equipo. **No cubra el equipo.**

2. Para hacer uso del vaso humidificador gire la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj para destaparlo. Vierta agua de botella, botellón o filtro hasta la marca del vaso y gire la tapa para cerrarlo. **No use agua de la llave o hervida caliente.** Colóquelo en el espacio destinado y asegúrelo con la correa de velcro.

3. Conecte el tubo que viene incorporado al humidificador a la salida de oxígeno del concentrador.

4. Hay equipos que traen el cable de poder fijo y otros removible. Si su caso es el segundo, identifique en la parte trasera la entrada del cable de poder y conéctelo. El otro extremo del cable irá a un toma corriente de 110V a 3 A, de manera directa. **No haga uso de extensiones o adaptadores.**



Instrucciones de uso

5. Ponga el interruptor de alimentación en la posición de encendido, es decir, en la posición "I".

6. Para comenzar el suministro de oxígeno, gire el regulador de flujo hasta el valor deseado.

7. Al usar la cánula de oxígeno, conéctela a la salida del humidificador. Luego, déjela reposar sobre las orejas del paciente e inserte el tubo nasal en las fosas nasales.



8. Cuando termine la terapia con oxígeno, coloque el interruptor en la posición "O" y desconéctelo de la corriente. El aire seguirá saliendo por aproximadamente 1 minuto.

Recomendaciones

Limpiar el filtro de entrada de aire, ubicado en la parte lateral, 2 vez por semana con agua y jabón. Cambiar diariamente el agua del humidificador.

Ante la interrupción de energía se activa una alarma sonora intermitente y el LED verde se apaga. Se activará un LED amarillo o rojo cuando la concentración de O₂ decae. Si hay una alarma sonora y se encienden ambos LED es porque se ha bloqueado la cánula.

El área donde se ubique el equipo debe estar totalmente despejada, en al menos 1 m², para evitar sobrecalentarlo.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos cada 3 meses.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

Para más información visite:
forpresalud.com.co/oxigeno