

Concentrador de oxígeno bajo flujo M50

SYSTEMED




Parte delantera del equipo



- 1. Medidor de flujo de oxígeno.
- 2. Perilla del medidor de oxígeno o flujómetro.
- 3. Salida de oxígeno.
- 4. Pantalla LCD.
- 5. Interruptor de encendido/apagado.
- 6. Luz indicadora de encendido.
- 7. Luz indicadora de alarma.
- 8. Etiqueta de modelo.

Parte trasera del equipo

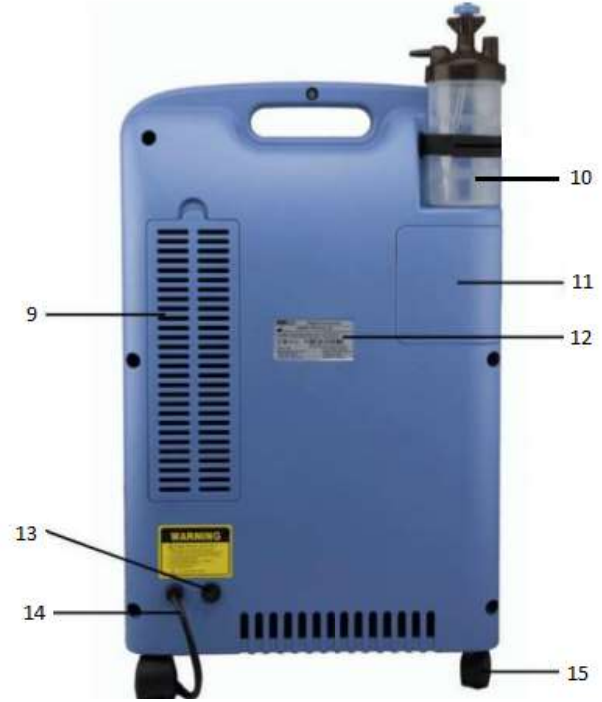

- 9. Gabinete filtro de entrada de aire.
- 10. Vaso humidificador.
- 11. Acceso a filtro de entrada.
- 12. Etiqueta de especificaciones.
- 13. Protector contra sobrecargas.
- 14. Cable de poder.
- 15. Llantas.

ForpreSalud IPS
CONFIANZA Y BIENESTAR

Telefono Fijo: 607-6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

Instrucciones de uso

1. Ubique el equipo en un área plana, con ambiente limpio, ventilado y lejos del sol. Es importante retirar el vinipel con que se entrega el equipo. **No cubra el equipo.**

2. Conecte el equipo a la red eléctrica a 110 V y 3 A, mediante el cable de poder. **No haga uso de extensiones o adaptadores.**



3. Para hacer uso del vaso humidificador sáquelo del empaque y gire la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj para destaparlo. Vierta agua de botella, botellón o filtro hasta la marca del vaso y gire la tapa para cerrarlo. **No use agua de la llave o hervida.**




4. Coloque el vaso humidificador y ajústelo con la banda. Luego conéctelo a la salida de oxígeno haciendo uso del adaptador incluido.

Instrucciones de uso

5. Presione el interruptor de encendido y espere hasta que el equipo comience a funcionar.

6. Para comenzar el suministro de oxígeno, gire suavemente la perilla del flujómetro hasta la cantidad de litros por minuto (L/min) indicada por el médico. Para aumentar el flujo gire la perilla hacia la derecha y para disminuirlo hacia la izquierda.

7. Al usar la cánula de oxígeno, conéctela a la salida del humidificador. Luego, déjela reposar sobre las orejas del paciente e inserte el tubo nasal en las fosas nasales.

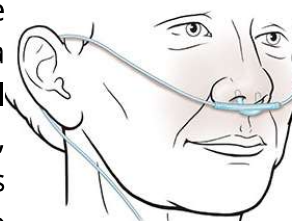

8. Cuando termine la terapia con oxígeno, apague el equipo con el interruptor y desconéctelo de la corriente.

Recomendaciones



Limpiar el filtro de entrada de aire, ubicado en la parte trasera, 1 vez por semana con agua y jabón. Cambiar diariamente el agua del humidificador

El área donde se ubique el equipo se debe encontrar totalmente despejada, al menos 1 m², para evitar sobrecalentarlo.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos cada 3 meses.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

Para más información visite:
forpresalud.com.co/oxigeno