


Concentrador de oxígeno alto flujo JAY-10




Parte delantera del equipo

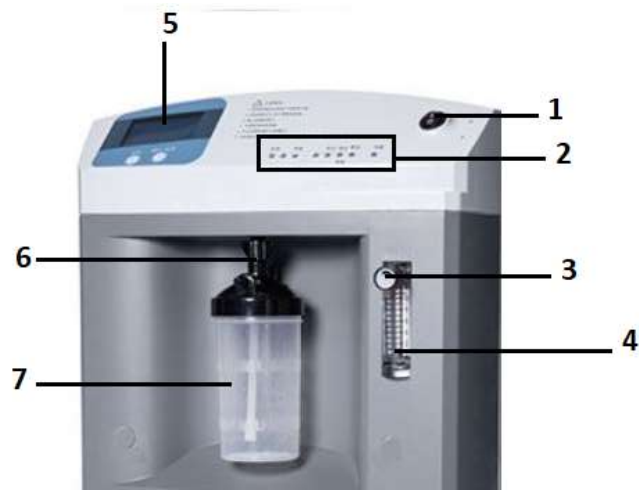

- 1. Interruptor de encendido/apagado.
- 2. Panel LED de alarmas.
- 3. Perilla reguladora de flujo.
- 4. Flujómetro.
- 5. Pantalla LCD.
- 6. Salida de oxígeno.
- 7. Humidificador.

Partes trasera y lateral del equipo

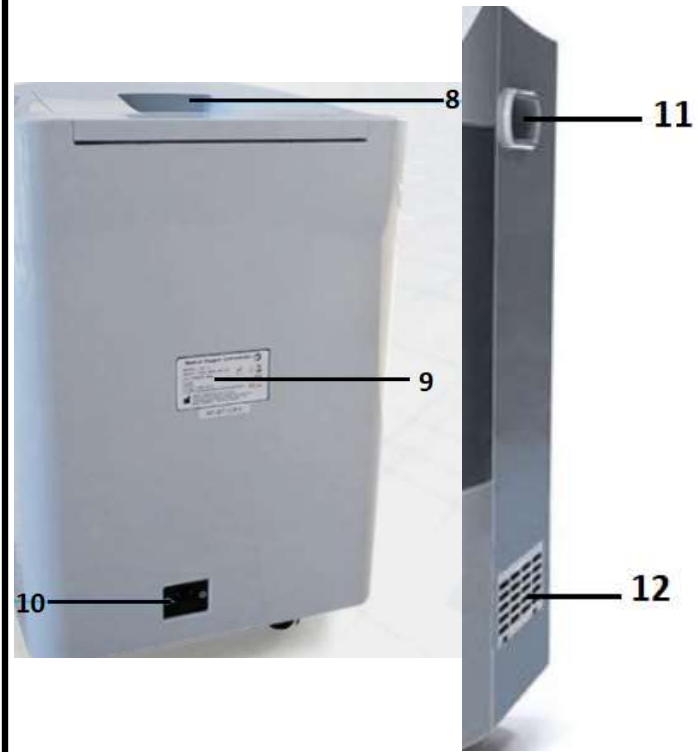

- 8. Asa de transporte.
- 9. Especificaciones técnicas del equipo.
- 10. Conector del cable de poder.
- 11. Asa de transporte.
- 12. Gabinete del filtro de aire.



TELEFONO FIJO: 607-6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24 h.: 322 2805312

Instrucciones de uso

1. Ubique el equipo en un área plana, con ambiente limpio, ventilada y lejos del sol. No olvide retirar el vinipel antes de utilizar el equipo. **No cubra el equipo.**

2. Para hacer uso del vaso humidificador gire la tapa en dirección contraria a las manecillas del reloj para destaparlo. Vierta agua de botella, botellón o filtro hasta la marca del vaso y gire la tapa para cerrarlo. **No use agua de la llave o hervida caliente.**

3. Coloque el vaso humidificador en el espacio destinado para esto y ajústelo. Luego, conecte el tubo del vaso a la salida de oxígeno y al conector situado en la tapa del vaso humidificador.

4. Identifique en la parte trasera la entrada del cable de poder y conéctelo. El otro extremo del cable irá a un toma corriente de 110/220 V a 4 A, de manera directa. **No haga uso de extensiones o adaptadores.**




Instrucciones de uso

5. Tras encender el equipo con el interruptor, verá como se enciende la pantalla. El LED señalado con las siglas "P.O." permanecerá encendido y de color verde.

6. Para comenzar el suministro de oxígeno, gire suavemente la perilla del flujómetro hasta la cantidad de litros por minuto (L/min) indicada por el médico. Para aumentar el flujo gire la perilla hacia la derecha y para disminuirlo hacia la izquierda.

7. Al usar la cánula de oxígeno, conéctela a la salida del humidificador. Luego, déjela reposar sobre las orejas del paciente e inserte el tubo nasal en las fosas nasales.

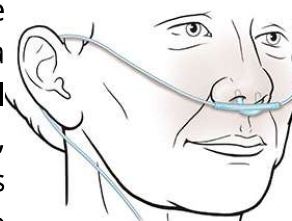

8. Cuando termine la terapia con oxígeno, coloque el interruptor en la posición "O" y desconéctelo de la corriente.

Recomendaciones

Limpiar el filtro de entrada de aire, ubicado en la parte lateral, 1 vez por semana con agua y jabón. Cambiar diariamente el agua del humidificador.

Las alarmas visuales que tiene el equipo son:

P.F.: Fallo de encendido (luz roja).

L.P.: Presión baja (luz amarilla).

H.T.: Presión o alta temperatura (luz roja).

L.O2.: pureza de oxígeno < 85% (luz roja).

H.O2.: pureza de oxígeno > 85% (luz azul).

El área donde se ubique el equipo debe estar totalmente despejada, en al menos 1 m², para evitar sobrecalentarlo.

Recuerde que puede hacer cambio de los insumos cada 3 meses.

No permita que personal ajeno a la institución realice el mantenimiento del equipo. Tenga en cuenta que el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 6 meses después de recibirlo.

El equipo se entrega en calidad de préstamo, por lo que daños en este o la no devolución generan cobro de pagaré.

No dude en comunicarse con nosotros si tiene dudas