

Concentrador de oxígeno portátil

Philips SimplyGo

PHILIPS




 **ForpreSalud IPS**
CONFIANZA Y BIENESTAR

Fijo: (607) 6986037


Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24h: 322 2805312

Descripción general del equipo

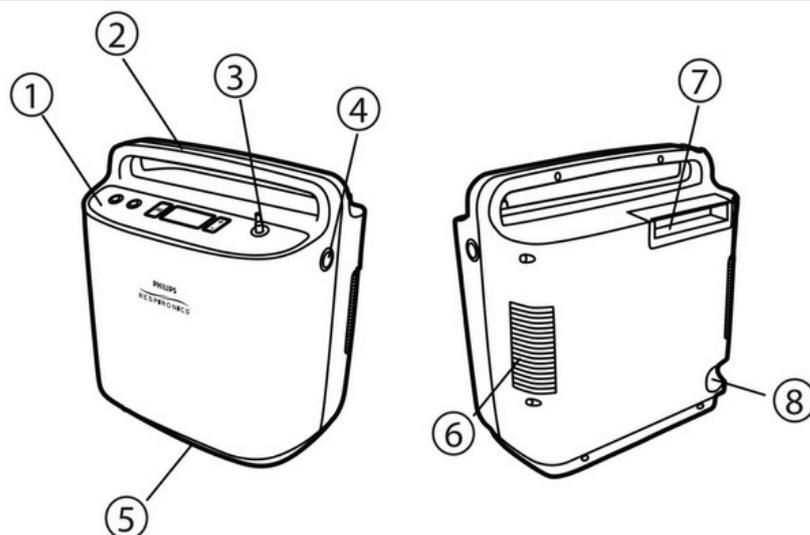

- 1) Panel de control
- 2) Sujetador de transporte
- 3) Conexión cánula paciente
- 4) Conexión para entrada de alimentación
- 5) Orificio de salida de aire
- 6) Orificio de entrada de aire
- 7) Batería
- 8) Puerto de datos

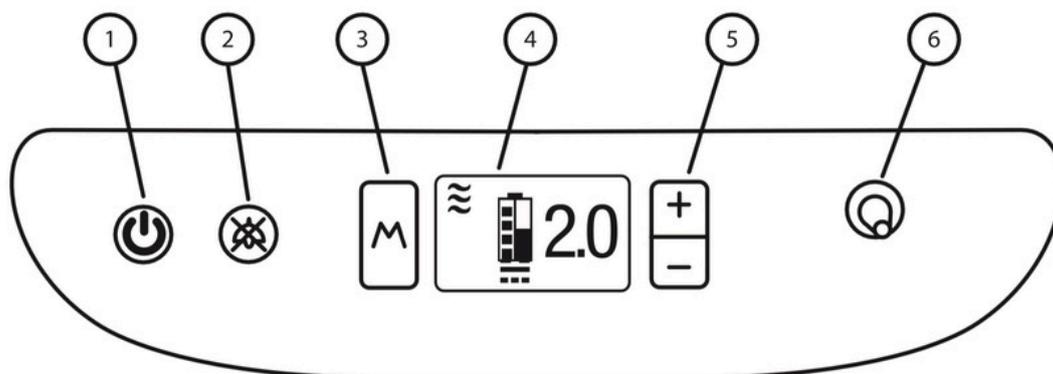

- 1) Botón de encendido y apagado
- 2) Botón para silenciar alarmas
- 3) Botón para cambiar de modo
- 4) Pantalla del equipo
- 5) Botones +/- para cambiar el flujo
- 6) Conexión para la cánula del paciente

Modos de funcionamiento del equipo



1. Modo pulso

En el modo pulso, el equipo detecta cuando el paciente comienza a inspirar y administra un volumen de oxígeno.


2. Modo flujo continuo

En el modo flujo continuo, el equipo administra un flujo constante de oxígeno en litros por minuto de acuerdo a lo ajustado en el panel de control.



3. Modo sueño


Es similar al modo pulso, el equipo detecta cuando el paciente comienza a inspirar para suministrar determinada cantidad de oxígeno, sin embargo en este modo dicha cantidad durará más tiempo y será de menor intensidad.

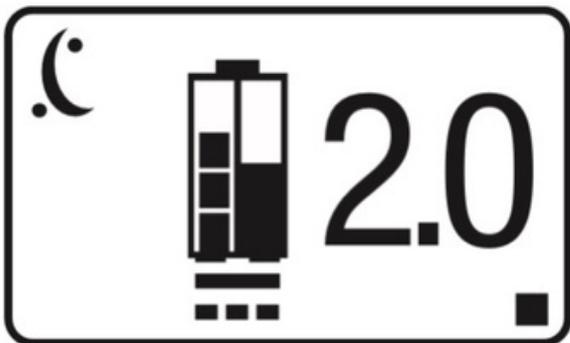

Instrucciones de uso

1. Conexión de la cánula

Conecte la cánula nasal en el conector que se encuentra en el panel de control del equipo, verifique que la cánula nasal quede sujeta con firmeza para evitar fugas y que esta no se doble para evitar interrumpir el flujo de oxígeno.

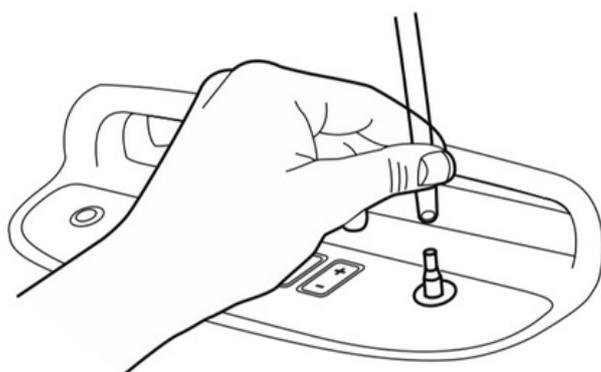

2. Colocación de la cánula nasal



Coloque la cánula nasal en el rostro del paciente tal como se muestra en la siguiente imagen, una vez puesta, el paciente debe respirar con normalidad.



Instrucciones de uso

3. Encendido del equipo

Pulse el botón de encendido/apagado del equipo por primera vez para encenderlo, una vez pulsado, se encenderá la retroiluminación de la pantalla así como los 5 botones del panel de control, la pantalla del equipo se debe ver de la siguiente manera.

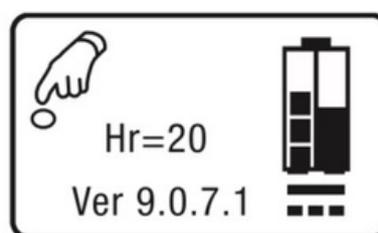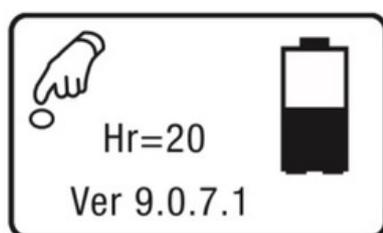

4. Puesta en marcha del equipo

Pulse el botón de encendido/apagado nuevamente para poner en funcionamiento el equipo, es decir, para suministrar oxígeno por la conexión de la cánula, al momento de poner en funcionamiento el equipo aparecerán las siguientes pantallas.



Instrucciones de uso

5. Configuración del flujo

Para ajustar el flujo que entrega en equipo se deben pulsar los botones “+” para aumentar los LPM o “-” para disminuir los LPM, a continuación se presentan los posibles flujos de acuerdo al modo de funcionamiento.


- **Modo pulso o sueño:** 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4,0; 4,5; 5; 5,5 y 6
- **Modo flujo continuo:** 0,5; 1; 1,5 y 2

6. Apagado del equipo


Para apagar el equipo una vez lo haya terminado de utilizar pulse el botón de encendido/apagado una vez, aparecerá la siguiente pantalla en el equipo.

Pulse una segunda vez el botón de encendido/apagado para apagar completamente el equipo.

Alimentación del equipo

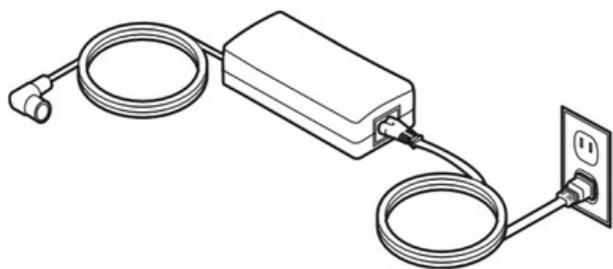

Conexión CA a la red eléctrica

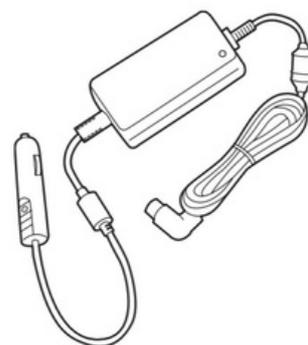

Conexión CC al carro

Batería del equipo


Duración de la batería

A continuación se presenta información sobre la duración de la batería del equipo de acuerdo al flujo establecido en la configuración para el paciente.

		Configuración de pulsos						Configuración de flujo continuo		
		1	2	3	4	5	6	0,5	1	2
Número de baterías	1	3,7 h	3,5 h	3,1 h	2,7 h	2,3 h	1,9 h	3,1 h	2,3 h	0,7 h
	2	7,4 h	7 h	6,2 h	5,4 h	4,6 h	3,8 h	6,2 h	4,6 h	1,4 h
	3	11,1 h	10,5 h	9,3 h	8,1 h	6,9 h	5,7 h	9,3 h	6,9 h	2,1 h
	4	14,8 h	14 h	12,4 h	10,8 h	9,2 h	7,6 h	12,4 h	9,2 h	2,8 h

Para conocer el estado de carga de la batería tenga en cuenta la siguiente información.

N.º de LED	Carga de la batería
4 LED encendidos:	75% a 100% de capacidad
3 LED encendidos:	50% a 75% de capacidad
2 LED encendidos:	25% a 50% de capacidad
1 LED encendido:	10% a 25% de capacidad
1 LED parpadea 3 veces:	La batería tiene menos de un 10% de capacidad y debe recargarse

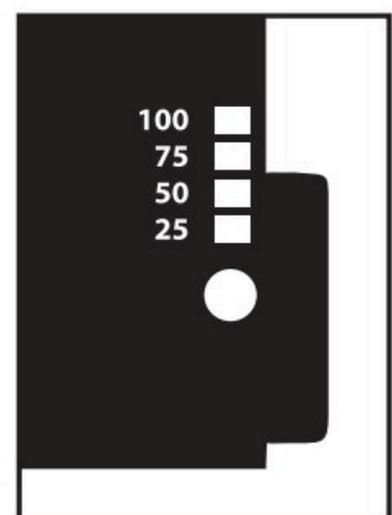

Recomendaciones de uso

- La primera vez que cargue la batería, asegúrese de cargarla por completo, utilicé el cargador de conexión a la pared.
- Cuando finalice la carga (lleva cuatro horas o menos), desconecte la fuente de alimentación de la pared y almacénela.

Advertencias

- No utilice el dispositivo sin la batería instalada y operativa.
- Asegúrese de que el espacio donde está utilizando el equipo no aumente ni reduzca su flujo de oxígeno respecto a su nivel recetado.
- El almacenamiento a temperaturas superiores a 45 °C, como en un coche caliente, puede degradar el rendimiento de la batería y reducir su vida útil.
- El oxígeno contribuye a la combustión. No utilice el equipo mientras fuma ni en presencia de llamas desprotegidas.
- No usar este equipo mientras el paciente se encuentre en su vivienda, usar el concentrador estacionario.
- No ubique el equipo en lugares con agua o muy húmedos.
- No deje caer el equipo ni lo golpee.

Recepción de la guía de manejo rápido

Firma paciente: _____

Cédula paciente: _____

Recuerde que al momento en que se le entrega el equipo, el responsable firma un pagaré el cual se hará efectivo en caso de que el equipo presente algún tipo de daño generado por mal uso.

Para más información visite: forpresalud.com.co/oxígeno